



CATÁLOGO de produtos

A SOL-MILLENNIUM™ É UMA EMPRESA DEDICADA AO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS QUE GARANTAM UM AMANHÃ MAIS SAUDÁVEL E SEGURO.

A SOL-Millennium™ é uma empresa com presença global, especializada no desenvolvimento de dispositivos médicos inovadores que garantem a segurança dos profissionais da saúde e pacientes, bem como outros profissionais da área que participam diretamente dos processos que envolvem produtos com risco de acidentes com perfurocortantes.

Estamos continuamente compartilhando nossas ideias e conhecimento com os profissionais que atuam em locais com maiores riscos e incidências de acidentes com perfurocortantes, tais como: enfermeiros, auxiliares e médicos, pois acreditamos que são fundamentais para que nossos produtos sejam desenvolvidos por nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento com a qualidade e segurança necessária. A cultura da SOL-Millennium™ centra-se em melhorias contínuas, inovações tecnológicas e serviços aos clientes.



SOL-CARE™

SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA FIXA



Os produtos Diabetes Care são desenvolvidos para prevenção de acidentes com agulhas. Além de diminuir a perda e o erro na dosagem na administração de medicamentos, conforme recomendação das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Conforto para o paciente com seu bisel trifacetado, agulha fina e lubrificada. As seringas SOL-Millennium™ são látex free e não possuem espaço morto. Tecnologia e segurança em um único produto. Escala nítida e cilindro transparente. Seringa graduada em unidades de insulina e ml, muito utilizada em vacinação.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
100089IMB	Seringa para Insulina com Agulha Fixa - 8 x 0,33	0.5 ml	2400	100
100081IMB	Seringa para Insulina com Agulha Fixa - 13 x 0,33	1 ml	2400	100

BE
NEFÍ
CIOS

Dispositivo de retração: agulha contaminada sai do tecido do paciente para dentro do cilindro da seringa.


Projetado para sua segurança: as mãos permanecem sempre atrás da agulha contaminada durante a injeção e ativação do dispositivo de segurança.

Design NO GAP: permite manipular o êmbolo até a marca zero sem acionar o dispositivo de segurança

Escala nítida: escala de 1 em 1 UI . Facilita a aspiração e precisão nas doses.

Anel de retenção: evita a retirada do êmbolo e vazamento da medicação.

Sustentabilidade: após o uso o êmbolo é quebrado, diminuindo o resíduo no coletor do perfurocortante e os custos do descarte.

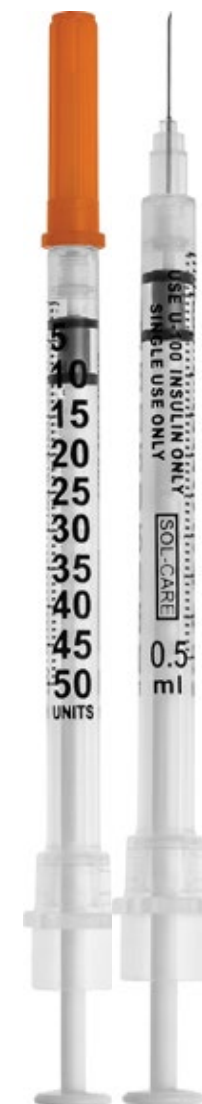

SOL-CARE™ SERINGA DE SEGURANÇA NO GAP



A SOL-Millennium™ apresenta a seringa com dispositivo de segurança retrátil Sol-Care NO GAP com conexão Luer Lock. Este produto foi desenvolvido com um recurso de segurança integrado, que retrai a agulha para o interior do cilindro externo da seringa, eliminando os acidentes com agulhas. O êmbolo é quebrado após o uso, impossibilitando a reutilização da seringa. Além disso, oferece maior segurança, já que agulha contaminada sai protegida de dentro do tecido do paciente para dentro do cilindro da seringa, evitando qualquer contato com perfurocortante contaminado. As seringas SOL-Millennium™ possuem conexão universal para todas agulhas, são látex free e não possuem espaço morto.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
120006IMB	Seringa de segurança NO GAP	3 ml	1800	100
120007IMB	Seringa de segurança NO GAP	5 ml	1200	100
120008IMB	Seringa de segurança NO GAP	10 ml	900	100
120009IMB	Seringa de segurança NO GAP	20 ml	600	100

BE
NEFÍ
CIOS

Dispositivo de retração: agulha contaminada sai de dentro do tecido do paciente para o interior do cilindro da seringa.

Projetado para sua segurança: as mãos permanecem sempre atrás da agulha contaminada durante a injeção e ativação do dispositivo de segurança.

Sinal de ativação: confirmação visual e audível da ativação do sistema de segurança.

Design No Gap: permite manipular o êmbolo até a marca zero sem acionar o dispositivo de segurança.

Anel de retenção: evita a retirada do êmbolo, vazamento da medicação e exposição a fluidos.

Mudança mínima da técnica: permite injeções de ângulo baixo.

Conforto e segurança para o Paciente: cilindro da seringa totalmente cristalino, escala em negrito e retração sob controle, sem dor.

Sustentabilidade: após o uso o êmbolo é quebrado, diminuindo o resíduo no coletor do perfurocortante e os custos do descarte.



SOL-CARE™ AGULHA DE SEGURANÇA



A linha de injeções da SOL-Millennium™ leva ao profissional da saúde o conforto e segurança necessário para trabalhar em todas situações do dia a dia. Os produtos são desenvolvidos com a mais alta tecnologia, para facilitar o uso e prevenir acidentes. O dispositivo de segurança é compatível com o tamanho da agulha e possui o padrão universal de cores no dispositivo: Segurança para o paciente e profissional.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
SNB2612	Agulha de segurança	13 x 0,45	800	100
SNB2210	Agulha de segurança	25 x 0,7	800	100
SNB2110	Agulha de segurança	25 x 0,8	800	100
SNB22125	Agulha de segurança	30 x 0,7	800	100
SNB21125	Agulha de segurança	30 x 0,8	800	100
SNB1815	Agulha de segurança	40 x 1,2	800	100

BE
NEFÍ
CIOS

Dispositivo de segurança integrado ao canhão da agulha: peça única, sem risco de desconexão e perda de medicação no circuito do dispositivo.

Padrão Universal de Cores: cor do dispositivo de segurança corresponde com a cor do calibre da agulha.

Trava Dupla: possui duas travas de segurança uma na base e outro no interior do dispositivo.

Bisel da agulha: bisel direcionado para cima, otimiza o tempo do profissional e reduz o risco de aplicações errôneas.

Conforto para o paciente: Agulha lubrificada, facilita o deslize no tecido do paciente.



SOL-M™

AGULHA PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA SEM FILTRO



Agulha para aspiração 40X1,2 mm, descartável, com ótimo fluxo, ponta sem corte, cânula em aço inoxidável siliconada, bisel simples e ponta romba, seguindo o padrão universal de cores rosa. Conexão perfeita em seringa Luer Lock e Luer Slip, com protetor em polipropileno de encaixe firme. Para utilização na aspiração, diluição e reconstituição de medicamentos.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
110022FB	Agulha para aspiração ponta romba sem filtro	40 x 1,2 mm	1000	100

**BE
NEFÍ
CIOS**

Ponta Romba: Reduz os acidentes causados por agulha.
Calibre 40X12: Fácil de aspirar medicamentos viscosos.
Protetor Rosa: Identificação rápida como agulha de aspiração.



SOL-M™

AGULHA PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA COM FILTRO




Agulha para aspiração 40X12mm. Descartável, com ótimo fluxo e ponta sem corte. Cânula em aço inoxidável siliconada, bisel simples e ponta romba, seguindo o padrão universal de cores roxa. Conexão perfeita em seringa Luer Lock e Luer Slip, com protetor em polipropileno de encaixe firme. Para utilização na aspiração, diluição e reconstituição de medicamentos.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
110022B	Agulha para aspiração ponta romba com filtro	40 x 1,2 mm	1000	100

BE NEFÍ CIOS

Ponta Romba: reduz os ferimentos causados por agulha.
Calibre 40X12: fácil de aspirar medicamentos viscosos.
Protetor Rosa: identificação rápida como agulha de aspiração.
5 Microns: filtragem eficaz de partículas contaminantes.

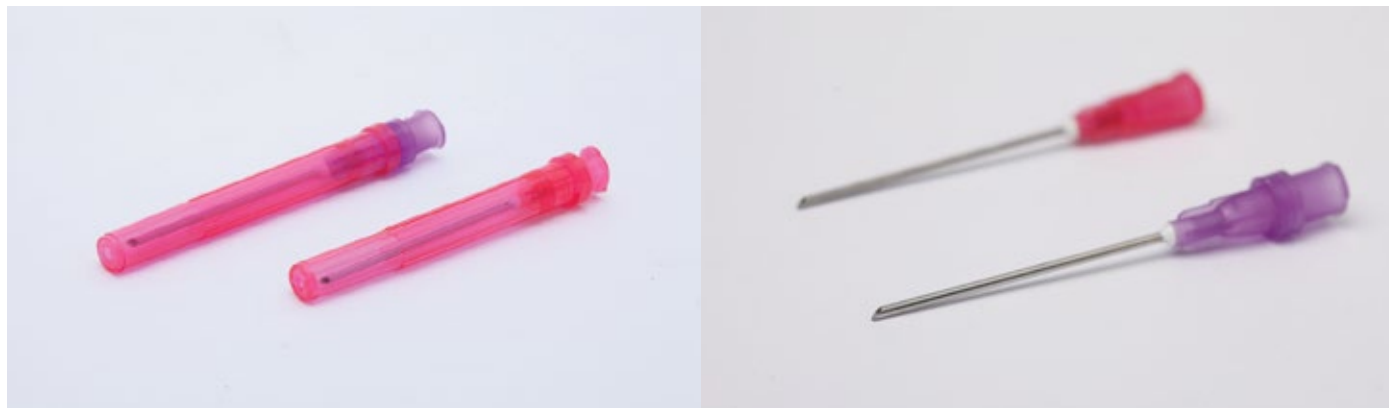

SOL-CARE™

ESCALPE DE SEGURANÇA PARA COLETA DE SANGUE COM ADAPTADOR



SOL-CARE™ Escalpe de Segurança para coleta de sangue com dispositivo de segurança. O mecanismo de segurança deve ser acionado imediatamente após a coleta de sangue, protegendo o perfurocortante contaminado. O design do dispositivo de sangue transparente permite a visualização rápida do refluxo da primeira gota de sangue, confirmando a venopunção e diminuindo a manipulação do acesso. Acompanha adaptador/holder de uso único, sendo conjunto estéril em uma única embalagem.



Recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica: DEHP Free.

COD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO DO CUBO VINÍLICO	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
110201030018	Escalpe de segurança para coleta de sangue	21G x 7"	200 unidades	25 unidades
110201030022	Escalpe de segurança para coleta de sangue	23G x 7"	200 unidades	25 unidades
110201030026	Escalpe de segurança para coleta de sangue	25G x 7"	200 unidades	25 unidades

BE
NEFÍ
CIOS

Design moderno e de fácil manuseio: o dispositivo de segurança é acionado através de um único movimento retilíneo.

Dispositivo de segurança: possui ranhuras na sua base. Mais segurança e conforto no acionamento.

Visualização rápida: dispositivo de segurança transparente permite a visualização rápida do refluxo de sangue, confirmando a venopunção e diminuindo a manipulação.

Conforto para o paciente: agulha com bisel trifacetado e lubrificada.

Conexão a vácuo: agulha distal para coletas múltiplas de sangue.

Adaptador: escalpe e holder em única embalagem estéril. Segurança para o paciente.

Latex Free: segurança para pacientes alérgicos a látex.

Infusão: permite infusões de curta duração.



SOL-CARE™

ESCALPE DE SEGURANÇA PARA COLETA DE SANGUE



SOL-CARE™ Escalpe de Segurança para coleta de sangue com dispositivo de segurança. O mecanismo de segurança deve ser acionado imediatamente após a coleta de sangue, protegendo o perfurocortante contaminado. O design do dispositivo de sangue transparente permite a visualização rápida do refluxo da primeira gota de sangue, confirmando a venopunção e diminuindo a manipulação do acesso.



Recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica: DEHP Free.

COD	DESCRIÇÃO	COMPRIENTO DO CUBO VINÍLICO	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
000000	Escalpe de segurança para coleta de sangue	00000	00000	00000

BE
NEFÍ
CIOS

Design moderno e fácil manuseio: o dispositivo de segurança é acionado através de um único movimento retilíneo. transparente permite a visualização do refluxo sanguíneo imediatamente.

Dispositivo de segurança: possui ranhuras na sua base, mais segurança e conforto no acionamento.

Visualização rápida: dispositivo de segurança transparente permite a visualização rápida do refluxo de sangue, confirmando a venopunção e diminuindo a manipulação.

Conforto para o paciente: agulha com bisel trifacetado e lubrificada.

Conexão a vácuo: agulha distal para coletas múltiplas de sangue.

Látex Free: segurança para pacientes alérgicos a látex.

Infusão: permite infusões de curta duração.



SOL-M™

COLETOR DE SANGUE



Dispositivo de segurança para coleta de sangue a vácuo, composto por duas partes holder e tubo a vácuo que retrai a agulha para dentro, impossibilitando o reuso. Compatível com todas agulhas para coleta de sangue, padrão universal. Seguindo o regulamento da Occupational Safety and Health Administration OSHA, protege as duas extremidades da agulha, eliminando o risco de respingos e contaminação cruzada, já que o dispositivo de segurança elimina a exposição a ambas extremidades da agulha contaminada.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
B7001BCD	Coletor de sangue	Único	50	400

BE NEFÍCIOS

Dispositivo de segurança a vácuo: agulha retrai da veia do paciente para o interior do dispositivo de segurança a vácuo através do tubo de ativação.

Conforto para o paciente: retração da agulha de forma suave e contínua.

Praticidade na punção: o design no dispositivo de segurança não obstrui a visão no momento da venopunção.

Norma NR 32: agulha da coleta de sangue fica encapsulada no sistema após ativação.



UM PORTFÓLIO COMPLETO PARA SUA SEGURANÇA

Oferecemos um portfólio de produtos com reconhecimento global, que estão disponíveis através de uma completa rede de distribuição mundial e efetuamos treinamentos a todos os clientes e parceiros conforme recomenda a norma NR-32. Entre em contato e saiba mais.

São Paulo

Rua Alvorada, 1289,
Cj.1004/1005 Vila Olimpia,
Telefone: (11) 3044 1183

Ribeirão Preto

Rua Virgílio de
Carvalho Neves Neto, 1065
Telefone: (16) 3442 1454

sol-m.com.br

